

スペアパーツ / ビバメイト プラス

製品名	製品	製品番号	標準価格
ビバメイト プラス ユニット (電源コード付)		U373	¥93,500
ビバメイト 3 モーター (ストレートコード付)		E015-002	¥53,500
ビバメイト 3 ストレートコード (1.2m)		E015-013	¥5,000
ライト付ミラー		U356-041	¥21,000
NCL-Sスタンド 標準セットには含まれて おりません		Z014-133	¥2,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
GX用 カーボンブラシ (2個入)		E023-011S	¥3,000
電源コード		U271-013	¥3,000
ミラーヘッド		U356-043	¥4,500
プロキットケース		N-620	¥4,000

スペアパーツ / ビバメイト 3

ビバメイト 3 ユニット		U319	¥22,000
ビバメイト 3 モーター (ストレートコード付)		E015-002	¥53,500
ビバメイト 3 ストレートコード (1.2m)		E015-013	¥5,000
ビバメイト 3 チャージャー		U321	¥10,500

NCL-Sスタンド		Z014-133	¥2,000
GX用 カーボンブラシ (2個入)		E023-011S	¥3,000
FC-25 フットペダル		Z018	¥5,000
プロキットケース		N-620	¥4,000

NSK

ビバメイト プラス / ビバメイト 3
PORTABLE MICROMOTOR

Viva-mate Plus
Viva-mate 3

compact & mobile



歯のポリッシングに

製品名 AR-ER4 (S) 製品番号 Y110-140 標準価格 ¥48,000

• 減速 4:1 • プロフィー用 • スクリュー式

NSK プロフィー : 医療機器承認番号 2090082Z00882000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器



歯の切削に

製品名 TI95EX 製品番号 C487 標準価格 ¥80,000

• 増速 1:5 • チタン製ボディ - * • FGバー用
• Max. 200,000 min⁻¹ • セラミックボールベアリング
• クリ-ンヘッドシステム • ウルトラブッシュ式チャック
• 4点注水スプレー

増速コントラアングルハンドピース TI95EX : 医療機器許可番号 09B2X00016号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

ビバメイト プラス / ビバメイト 3と組み合わせた場合は、最大150,000 min⁻¹となります。 * 外装部のみオールチタンで内装部分は含まれません。



携帯用注水排唾システム「ビバサポート」との併用例
往診先で5倍増速コントラを使用する際、「ビバサポート」を併用することにより、簡単に注水と排唾が行えます。

製品名 ビバサポート標準セット 製品番号 U379 標準価格 ¥82,000

医療機器承認番号213008Z20004000号 管理医療機器

セット内容

• コントロールユニット(ビバサポートユニット) • フタ付注水ボトル
• フタ付排唾ボトル • 注水チューブセット • 排唾チューブ

付属品 • 排唾チューブ(2本) • 排唾ノズル(5本) • チューブクランプ(5個)
• プロキットケース



株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 | 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL : 0289 (64) 3380 FAX : 0289 (62) 5636

東京事務所 | 〒110-0005
東京都台東区上野1-13-3 MYビル6F
TEL : 03 (3835) 2907 FAX : 03 (3835) 4332

大阪事務所 | 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル6F
TEL : 06 (6350) 7217 FAX : 06 (6350) 7218

製品に関するお問い合わせはこちらまで
受付時間9:00 - 17:00(土・日祝祭日を除く)
携帯・PHSからもご利用いただけます

ナカニシ コール
0120-7242-56

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-D125 Ver.8 08.02.05.A



Powerful Partners®

優れた携帯性と高性能を両立した在宅診療用マイクロモーターの理想形



小型、軽量、高性能を実現 歯科治療の活動範囲を広げます


社会の高齢化による寝たきりのお年寄りの増加もあり、在宅診療を望む患者さんが増えています。ビバメイトは出張診療、在宅診療、集団検診をはじめ、電源から離れた場所での治療、停電時の応急治療への対応など幅広い用途で活躍します。

高性能モーター

軽量、コンパクトでしかも高トルク。コアレスモーターの採用により低発熱、低振動、低ノイズを実現。2,000 ~ 30,000min⁻¹(ビバメイトプラスは3,000 ~)の間でスピード調節が可能。また、フィードバック回路により、モーターにかかる負荷の変動に対して回転速度を一定に保ち、抜群の粘りを発揮。義歯の調整にも最適です。

優れた携帯性

「邪魔にならず、持ち運び自由」を徹底的に追求しました。ユニットの形状は、無駄な凹凸を無くしたシンプルなデザイン。性能を落とすことなく小型化、軽量化を実現しました。持ち運びに便利なプロキットケースが標準で付属しています。

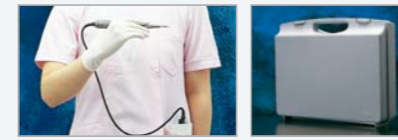

プロキットケース(標準梱包箱)

ビバメイトをはじめ、必要最小限の治療機器を収納でき、往診先への持ち運びに便利です。

様々な治療に対応

各種ハンドピースと組み合わせることにより、義歯の調整、歯のポリッシング、切削等が1台で可能です。往診先での様々な治療に対応できます。



一般切削用 一般切削用 PMTC用 エンド用

携帯マイクロモーター バッテリー & AC電源

ビバメイト プラス

Viva-mate Plus

状況に応じて電源の使い分けができる
バッテリー & AC電源2WAY仕様マイクロモーター



ビバメイト プラス セット

標準セット

製品名 **ビバメイト プラス** 製品番号 Y140-639 標準価格 ¥177,000
標準セット

セット内容

- コントロールユニット(ビバメイト プラス ユニット) ・ 電源コード
- モーター(ビバメイト 3 モーター) ・ ストレートハンドピース(EX-6L)
- プロキットケース

ハンドピーススタンドはオプションです

サブセット(ハンドピース無し)

製品名 **ビバメイト プラス サブセット** 製品番号 Y140-656 標準価格 ¥147,000

セット内容

- コントロールユニット(ビバメイト プラス ユニット)
- モーター(ビバメイト 3 モーター) ・ 電源コード ・ プロキットケース

ハンドピーススタンドはオプションです

仕様

- 電源 : AC100 V 50/60 Hz
Ni-Cd バッテリー
- 充電時間 : 5時間
- 回転速度 : 3,000 ~ 30,000 min⁻¹
- ユニット重量 : 1.35 kg
- ユニット寸法 : W75 x D214 x H44 mm

医療機器承認番号20900BZZ00856000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

フットペダルの接続はできません。

携帯マイクロモーター バッテリー専用

ビバメイト 3

Viva-mate 3

小型、軽量ユニット(600g)で使いやすい
急速1時間充電バッテリー駆動マイクロモーター



ビバメイト 3 セット

標準セット

製品名 **ビバメイト 3 標準セット** 製品番号 Y103-630 標準価格 ¥116,000

セット内容

- コントロールユニット(ビバメイト3 ユニット)
- モーター(ビバメイト3 モーター)
- チャージャー(ビバメイト3 チャージャー)
- ストレートハンドピース(EX-6L) ・ ハンドピーススタンド
- プロキットケース

サブセット(ハンドピース無し)

製品名 **ビバメイト 3 サブセット** 製品番号 Y140-600 標準価格 ¥86,000

セット内容

- コントロールユニット(ビバメイト3 ユニット)
- モーター(ビバメイト3 モーター)
- チャージャー(ビバメイト3 チャージャー)
- ハンドピーススタンド ・ プロキットケース

仕様

- 電源 : Ni-Cd バッテリー
- 充電時間 : 1時間
- 回転速度 : 2,000 ~ 30,000 min⁻¹
- ユニット重量 : 600 g
- ユニット寸法 : W72 x D163 x H39 mm

医療機器承認番号20800BZZ00561000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ライト付ミラーの接続はできません。

2 電源方式

内蔵バッテリーは連続1時間(充電5時間)の使用が可能です。バッテリーが切れた時も電源コードを家庭用コンセントに差込めば、充電を待たずに即使用でき、状況に応じてバッテリーと家庭用電源の使い分けが可能です。バッテリーの充電には、タイマーにより一定時間経過すると充電を停止する安全回路を採用しています。

ライト付ミラーの接続が可能(オプション)

ライト付ミラーが接続できるので、口腔内の診察を更に容易にします。また、ハロゲンランプの電圧を一定に保つ照明制御回路を内蔵しているので、安定した光を供給します。



操作パネル



- 正逆転切換スイッチ
- スピード調整ツマミ
- モーターソケット
- パイロットランプ
- ファンクション切換スイッチ
- ライト付ミラーソケット

急速1時間充電

わずか1時間で充電が完了するので、充電忘れや充電不足の時でもすぐに対応できます。1回の充電で連続1時間の使用が可能です。マイコン内蔵のチャージャーにより、バッテリーに最適な充電を行うので、バッテリーが長持ちします。

充電ランプ装備

チャージャー(充電器)には充電中(赤ランプ)と充電完了(緑ランプ)を表示するランプが装備されていますので、充電状態が一目で確認できます。

フットペダルの接続が可能(オプション)

フットペダルでのモーターのON/OFF操作が可能です。正逆転切換、スピードコントロールは手動の時と同様、ユニットで操作できます。



操作パネル



- 正逆転切換スイッチ
- モーターソケット
- 制御切換スイッチ
- スピード調整ツマミ