

スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
PM-S ハンドピース (ショートタイプ) 長さ93mm		T706-010	¥47,000	PM Oリング セット (3個入り)		Y900-054	¥900
PM-L ハンドピース (ロングタイプ) 長さ106mm		T705-010	¥47,000	Oリング ノズルフロント側 (先端ノズル側)		0312039 070	¥300
PM-PTL パテラスカップリング用 パウダーケース		T705-020	¥95,000	Oリング ノズルリア側		0312029 070	¥300
PM-M4 M4用 パウダーケース		T719-020	¥84,000	ノズル		T705A013	¥12,000
PM-B2 B2/B3用 パウダーケース		T718-020	¥84,000	リングレンチ		T705-401	¥500
PM-KV KaVo® MULTiflex® カップリング用 パウダーケース		T739-020	¥95,000	ブローアノズル		T705-094	¥1,500
PM-SR Sirona® Quick カップリング用 パウダーケース		T740-020	¥95,000	パッキン (薄) パウダーケース用		T705-136	¥1,900
PM-WH W&H® Roto Quick® カップリング用 パウダーケース		T745-020	¥95,000	パッキン (厚) パウダーケース用		T705-135	¥900
PM-BA Bien-Air® Unifix® カップリング用 パウダーケース		T741-020	¥95,000	タービン用オイル		Z016-112	¥700
PM-MR モリタ カップリング用 パウダーケース		T737-020	¥95,000	清掃ワイヤー		T705-090	¥600
パウダーケース カバー		1. T705-133 2. T705-233 3. T705-333	各¥1,500	清掃用ファイル		T705-167	¥600
クリーニング パウダー (100パック入り)		Y900-052	¥16,800	清掃用ブラシ		T705-092	¥400
パテラスOリング セット (5個入り)		Y900-580	¥1,500				

対応カップリング

会社名	NSK	KaVo®	Sirona®	W&H®	Bien-Air®	M4	B2	モリタ	セット内容
製品名	PM-PTL-S	PM-KV-S	PM-SR-S	PM-WH-S	PM-BA-S	PM-M4-S	PM-B2-S	PM-MR-S	● 本体 (PM-S or PM-Lハンドピース + PM本体) ● パウダーケースカバー3個(ブルー・グリーン・ピンク) ● クリーニングパウダー(12g入り)10パック ● 掃除用ワイヤー、ブラシ、ファイル ● 交換用ノズル・リングレンチ
製品番号	Y135-011	Y135-015	Y135-018	Y135-016	Y135-017	Y135-013	Y135-014	Y135-027	
標準価格	¥142,000	¥142,000	¥142,000	¥142,000	¥142,000	¥131,000	¥131,000	¥142,000	
製品名	PM-PTL-L	PM-KV-L	PM-SR-L	PM-WH-L	PM-BA-L	PM-M4-L	PM-B2-L	PM-MR-L	
製品番号	Y135-019	Y135-023	Y135-026	Y135-024	Y135-025	Y135-021	Y135-022	Y135-028	
標準価格	¥142,000	¥142,000	¥142,000	¥142,000	¥142,000	¥131,000	¥131,000	¥142,000	
接続可能 カップリング									
	NSK PTL-CL-4HV-T	KaVo® MULTiflex® LUX	Sirona® Quick Coupling	W&H® Roto Quick®	Bien-Air® Unifix®	ミッドウェスト 4ホールに 接続可能	ボードン 2/3ホールに 接続可能	モリタ αメインチューブ	

※KaVo®(カボ)とMULTiflex®LUX(マルチフレックス)は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. (Germany)の登録商標です。
Sirona®(シロナ)は、Sirona Dental Systems GmbH (Germany)の登録商標です。
W&H®とRoto Quick®(ロトクイック)は、W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria)の登録商標です。
Bien-Air®(ビエン・エア)とUnifix®(ユニフィックス)は、Bien-Air Dental S.A. (Switzerland)の登録商標です。

135°C 555 135°Cまでの温度でオートクレーブが可能です

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 | 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL : 0289(64)3380 FAX : 0289(62)5636

東京事務所 | 〒110-0005
東京都台東区上野1-13-3 MYビル6F
TEL : 03(3835)2907 FAX : 03(3835)4332

大阪事務所 | 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪千代ビル6F
TEL : 06(6350)7217 FAX : 06(6350)7218

製品に関するお問い合わせはこちらまで
受付時間9:00 - 17:00(土・日祝祭日を除く)
携帯・PHSからもご利用いただけます

ナカニシ コール
0120-7242-56

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-D126 Ver.8 08.01.20.Y

NSK

プロフィーメイト
TOOTH CLEANING HANDPIECES

Prophy-Mate

clean & bright - quickly



Powerful Partners®

歯の白さ、輝きがよみがえります。

プロフィーメイトはご使用のエアータービンハンドピースと付けかえて使用できる軽量、コンパクトでメンテナンスが容易な、歯面清掃用ハンドピースです。独自のツインノズルシステムや、使いやすさを徹底追求したデザインで、優れた操作性と高いクリーニング効果を発揮します。

管理医療機器 医療機器許可番号 09B2X0016

プロフィーメイト S ショートタイプ



プロフィーメイト L ロングタイプ




どんな部位にも的確に届く



長さ、角度、カーブなど考え抜かれたノズル形状により、歯面のどの部位にも噴射でき、的確に汚れを除去することができます。ブラークの除去や、矯正装置のブラケットまわりの汚物の除去にも威力を発揮します。

先端のノズルは取り外し可能

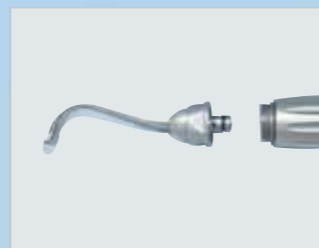

先端のノズルは簡単に取り外しができるので、メンテナンスが非常にしやすくなりました。また、交換用ノズルが1本付属しています。

美しく持ちやすいデザイン



美しいスタイルは、持ちやすさ、使いやすさの徹底的な追求から生まれました。ラウンドフォルムのハンドピースは、軽く握るだけで手にしっかりとフィット。深溝カッティングのグリップが指先を確実にキャッチし、ノズル先端の向きの微妙なコントロールを可能にします。ハンドピースは手の大きさに合わせてショートタイプとロングタイプからお選びいただけます。

3色のパウダーケースカバー



スベアの透明パウダーケースカバーが3色(ブルー・グリーン・ピンク)付属。簡単に交換ができるので、予備としてだけではなく、気分により色を変えて楽しむこともできます。

※パウダーケースカバーはオートクレーブできません。アルコールで消毒してください。

COLOR COVER



プロフィーメイトの使用例

使用前



使用后




ワンタッチ脱着で簡単メンテナンス



手で持ったまま中指と人差し指で指掛けリングをはさんで手前に引けば、ハンドピースが簡単に脱着でき、付属の掃除用ブラシ、掃除用ワイヤーで簡単にメンテナンスが出来ます。ハンドピースは繰り返しオートクレーブが可能です。また、超音波洗浄も可能です。

ホースの存在を忘れるほどの軽快感

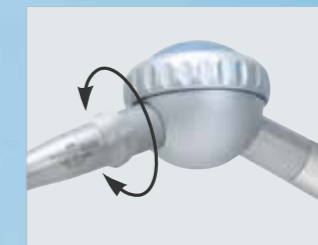

2ヶ所の接続部は360°ツイストフリー。ハンドピースとパウダーケースの接続部は回転部にかかるエアの圧力を抑え、エア使用時でもスムーズに動く構造になっています。また、ホースの接続は最も邪魔にならない、重さを感じない位置、角度になっており、ホースに束縛されることなく、軽快に操作でき、術者の疲労を大幅に軽減します。

ナカニシ独自のツインノズルシステム



パウダーケース内の2つの噴射ノズルから同時にエアを噴射し、パウダーをケース中央の吸入ノズルにムラなく一定して集めます。これにより安定したパワフルな噴射が可能になり、優れたクリーニング効果を発揮します。また、ドーム状パウダーケースとの組み合わせにより、パウダーの吹き残りが少なく、無駄なく使用できます。

さまざまなカップリングに対応



主要各社ブランドのカップリングに対応できるラインナップをご用意しました。しかもワンタッチで接続可能です。

レモンの香りのクリーニングパウダー



レモンの香りのクリーニングパウダーは、お口の中を爽やかにし、患者さんの気持ちを和らげます。また、防湿処理を施したパウダーは、パウダーケース容量に合わせて、適量の12gごとにアルミパックされています。

届出番号 09B2X0016 000001号