

NSK

ラボソニックカッター

HIGH PERFORMANCE ULTRA SONIC CUTTER

LABO SONIC CUTTER

beautiful cutting



ホワイトニング、マウストレーの切削

プラスチック・ラバー素材の
切削・加工に最適な
画期的超音波カッター



Powerful Partners®

ラボソニックカッターは歯科切削作業の効率化を図る画期的な超音波カッターです。アクリル樹脂系の材質はどんなバーを使っても目づまりが起き、切削に手間がかかります。こんな時「超音波振動切削」を採用したラボソニックカッターなら、方向性を出さずだけで驚くほどスムーズに切削が行えます。アクリル樹脂系だけでなくさまざまな材質の切削に使用できます。

ラボソニックカッターなら、このような多彩な切削ができます。




●ホワイトニング、マウストレーの切削




●矯正用ベースプレート(アクリル樹脂)の切削




●マウスピース(シリコンゴム等)の切削

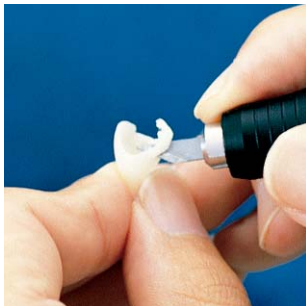


●テンポラリークラウン歯頭部等の切削

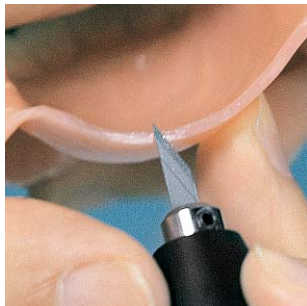

●ポリスルホン床やレジン床、プラスチックなどの切削

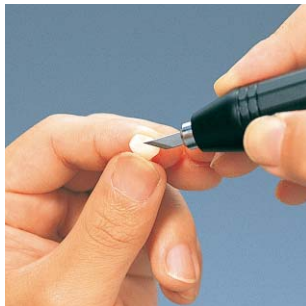

●人工歯(レジン歯)咬頭や粘膜側のカット

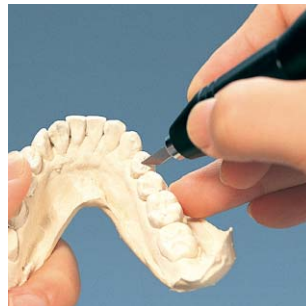

●咬合面気泡による突起物の除去

ラボソニックカッター 標準セット

販売名：ラボソニックカッター 一般的名称：歯科技工用形成器具
届出番号：09B2X00016000071号 一般医療機器



製品名	製品番号	標準価格
ラボソニックカッター 標準セット	Y102782	¥99,000

セット内容
コントロールユニット(ラボソニックカッターユニット)
ラボソニックカッターハンドピース
フットペダル(FC-24) ハンドピーススタンド
替刃：40枚(エヌティイ株式会社DC-200 30°)
六角レンチ1.5mm スペアーセットビス：4本

仕様

電源：AC100V 50-60Hz
発振周波数：39.5KHz 出力：30W

特長

トリミング時にチッピングの心配がありません。
石膏・プラスチック・ワックス・印象材・ゴム等の材料をスムーズにカットできます。
歯間、乳頭部に付着した気泡による石膏の突起部の除去も容易に行うことができます。
陶材の超音波コンデンサーとしても利用できます。
インプラント上部構造の鋳造前レジンパターン分割にも最適です。
矯正用ベースプレートの切削に最適です。

スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格
ラボソニックカッターユニット		U339	¥46,500
ラボソニックカッターハンドピース		E163	¥45,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
FC-24フットペダル		Z160	¥5,000
ハンドピーススタンド		Z095101	¥2,000

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL：0289(64)3380
FAX：0289(62)5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野 4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL：03(5828)7716
FAX：03(5828)0064

大阪事務所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原 4-1-45
新大阪八千代ビル6F
TEL：06(6350)7217
FAX：06(6350)7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間(土日祝日を除く) 9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。